


为了守护不可替代的宝贵生命



立足于人与医疗之间...  
The Bridge to Good Health Care

## 一次性使用肠内营养输注器

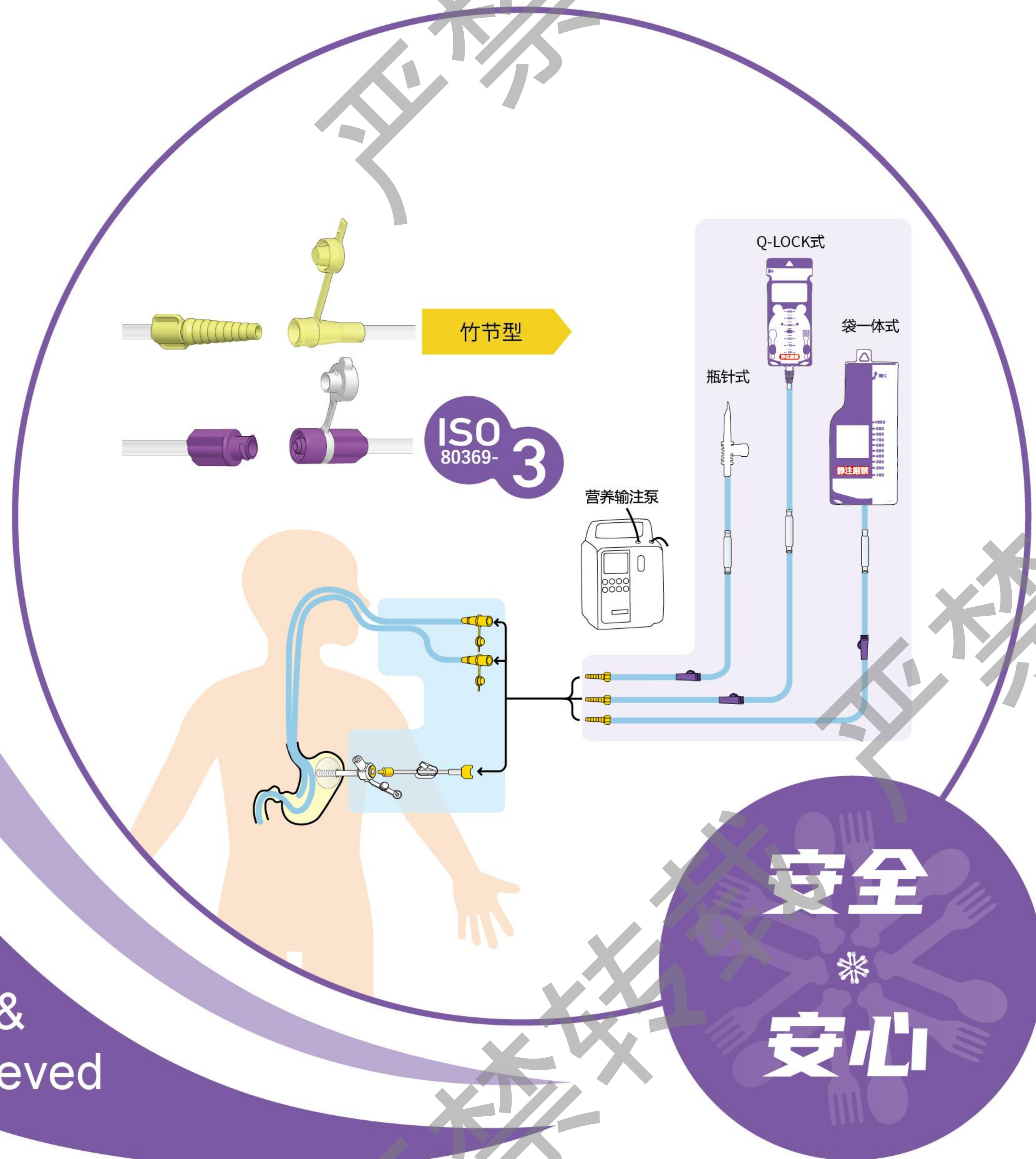

safety & relieved

产品分类	输注方式	袋体容量	包装数
瓶针式	重力/泵用	—	50套×4盒=200套
袋一体式	重力/泵用	500ml、1000ml	30套×4盒=120套
袋分体式(Q-LOCK式)	重力/泵用	300ml、600ml	15套×4盒=60套

禁忌内容和注意事项详见说明书

大连JMS医疗器具有限公司  
地址:辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号  
电话:0411-87611733(总机) 87611734(销售)

北京分公司  
地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼302室  
电话:010-68288395

公司公众号:大连JMS医疗器具有限公司  
公司网站:www.jmsdl.com

产品注册证号:辽械注准20202140004  
广告审批号:辽械广审(文)第290916-08391号

分类号:D-5820E2701-F  
修订号:B  
修订日期:2025年8月



大连JMS医疗器具有限公司



## 安全

- ◆ 医用级材质,符合国际医学标准;
- ◆ 不含DEHP,有效避免致癌、生殖毒性等潜在危害;
- ◆ 袋体及紫色软管均为双层材质,防止印刷颜色污染营养剂;

## 安心

- ◆ 细节人性化设计
- ◆ 齐全的产品规格
- ◆ 多样的接口设计
- ◆ 支持多场景使用

## 使用便捷

**瓶针式(\*)** 针尖锋利,流量大,可升级,与塑料瓶和玻璃瓶对接。


◆ 多规格接口设计,可随时应对市场规格切替



## 袋体的人性化设计


◆ **钻石孔设计(\*)**

便于管路收纳

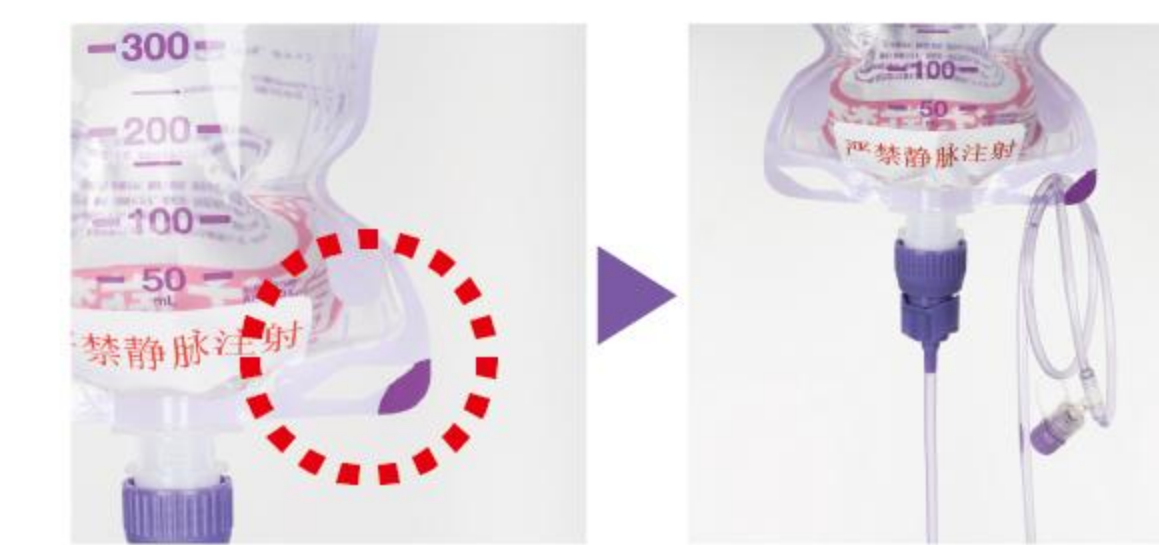

◆ **双面刻度设计(\*)**

易于观察液体容量。

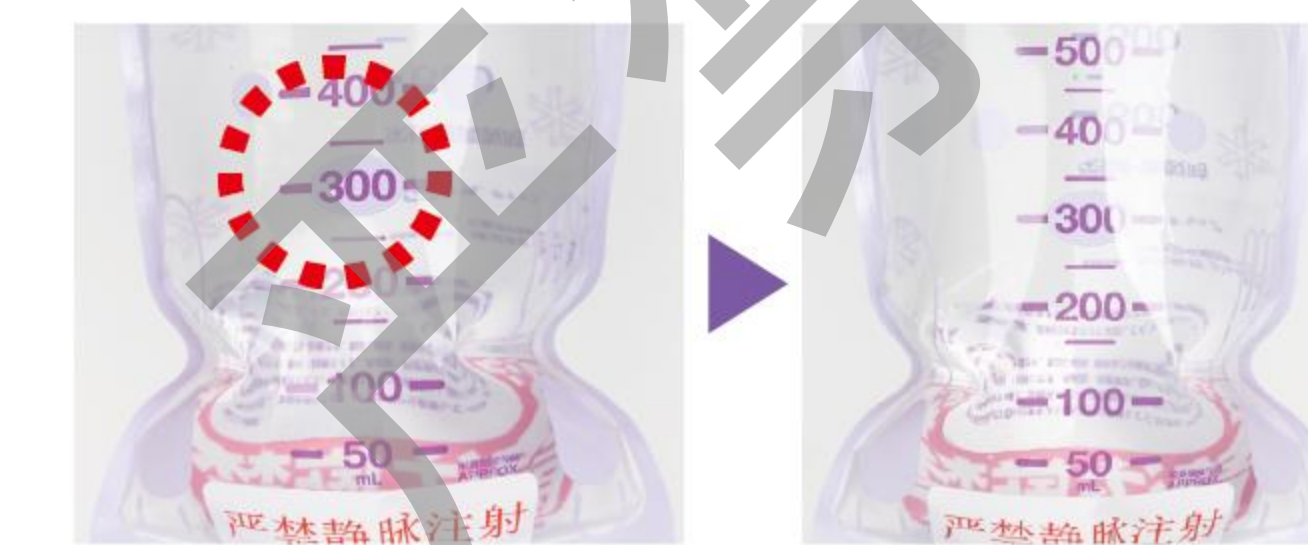

◆ **开口处把手设计**

可实现任意状态下单手操作。




◆ **袋体采用波浪形封印** 有效防止袋体变形。确保在配制和输注时,刻度一致,精准控制输注量。省去中间量杯灌装环节。



◆ **袋体超高耐压(\*)**

支持重叠堆放,远距离运输。

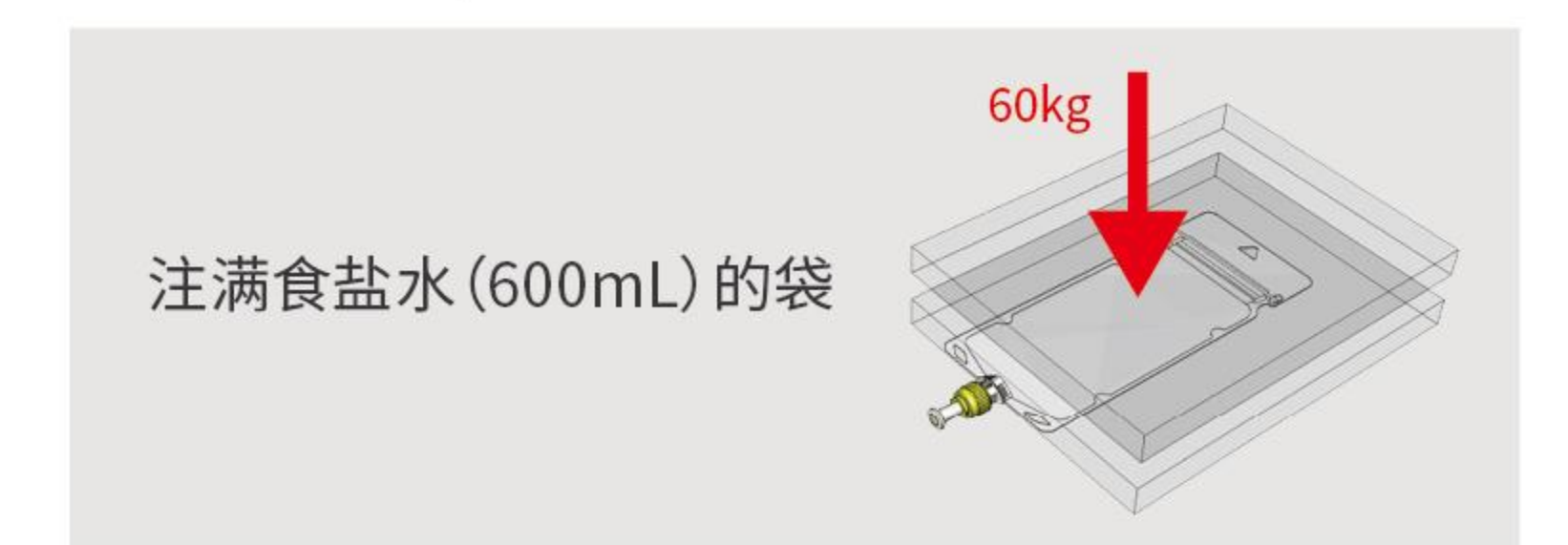


与不同包装肠内营养剂的连接方式

不同形式的营养制剂		适配的连接器		与营养制剂链接	
玻璃瓶			带透气帽的针式穿刺器		针式穿刺器与瓶口胶塞穿刺连接
			瓶盖接口		瓶盖接口与玻璃瓶口卡扣连接
塑料瓶			瓶盖接口		瓶盖接口与塑料瓶口螺旋连接

## 袋分体式(Q-LOCK式)——支持营养剂的集中配置

◆ **独家Q-LOCK设计**

- ① 管路与袋体之间采用“Q锁”连接,体现“Quick&Easy”的设计理念。
- ② 分离操作简便。通过锁紧动作,迅速判断连接程度,防止脱落发生。

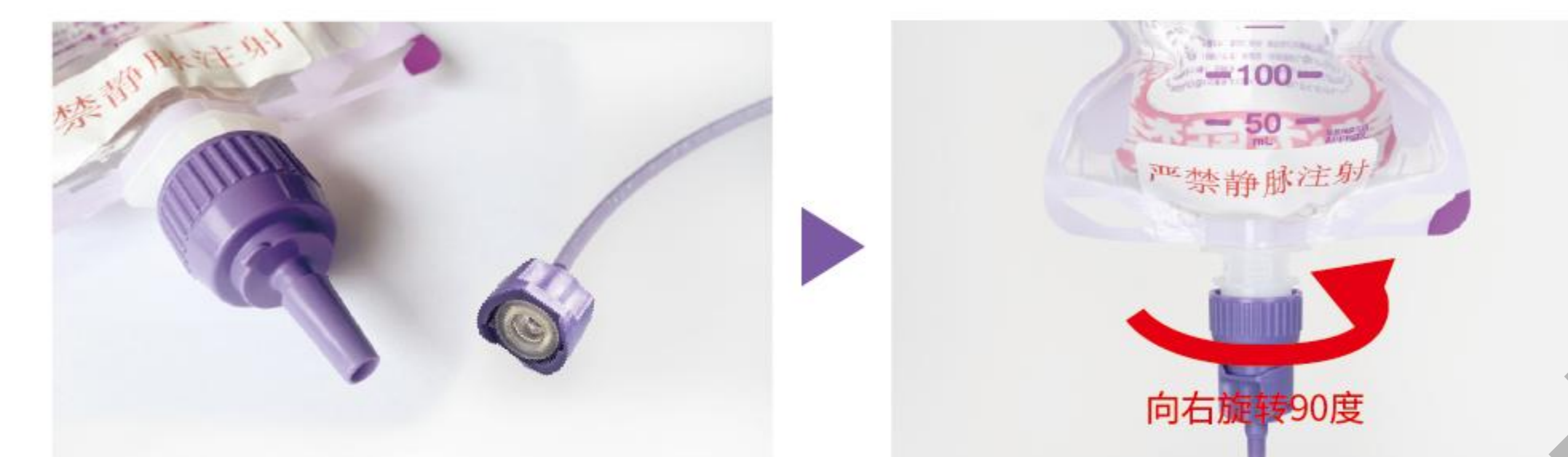

◆ **专用配液架台的定制服务**

操作便捷,便于配液,提高效率

